

# GÉZATONE

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА  
ЗА КОЖЕЙ  
GALVANIC BEAUTY SPA+

BIO SONIC  
m 776



ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ИОНОФОРЕЗ

ВИБРОМАССАЖ

ИК ПРОГРЕВ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ  
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

СОЧЕТАНИЕ 4 МЕТОДИК В АППАРАТЕ GEZATONE BIO SONIC m776 ПОЗВОЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНО ОЧИСТИТЬ КОЖУ И СКОРРЕКТИРОВАТЬ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ, ПОВЫСИТЬ СТЕПЕНЬ УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ «ИЗНУТРИ» И УЛУЧШИТЬ ЕЁ ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ, АКТИВИЗИРОВАТЬ СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА, УМЕНЬШИТЬ МОРЩИНЫ И ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ, УЛУЧШИТЬ ЦВЕТ ЛИЦА, ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРИЗНАКОВ СТРЕССА И УСТАЛОСТИ.



ЖИРНАЯ КОЖА,  
РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ  
ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ, ПОВЫШЕННОЕ  
САЛООТДЕЛЕНИЕ



ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
КОЖИ И ПРОФИЛАКТИКА  
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО  
СТАРЕНИЯ



НЕРОВНЫЙ ТОН, ТУСКЛЫЙ  
ЦВЕТ ЛИЦА, НЕДОСТАТОК  
ВЛАГИ И ПИТАТЕЛЬНЫХ  
ВЕЩЕСТВ, ШЕЛУШЕНИЕ



СНИЖЕНИЕ УПРУГОСТИ И  
ЭЛАСТИЧНОСТИ  
МОРЩИНЫ ГЛУБОКИЕ И  
МЕЛКИЕ



ОТЕКИ  
ПАСТОЗНОСТЬ,  
«УСТАВШАЯ» КОЖА

## ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ

КОМПАКТНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ GEZATONE BIO SONIC m776 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И КОМПЛЕКСНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛЮБОГО ТИПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕТОДИК: ДЕЗИНКРУСТАЦИИ, ИОНОФОРЕЗА, ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА И ИК ПРОГРЕВА.



### ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ

- УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, КОМЕДОНОВ И ИЗБЫТКА КОЖНОГО САЛА
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛЕНИЙ
- УСИЛЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
- СОКРАЩЕНИЕ ПОР И НОРМАЛИЗАЦИЯ САЛООТДЕЛЕНИЯ



### ИОНОФОРЕЗ

- ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДЕПО.
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН
- ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ДЕТОКС
- ТОНИЗАЦИЯ И СОКРАЩЕНИЕ ПОР
- КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН И ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



### ВИБРОМАССАЖ

- УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН И ПОДТЯЖКА КОЖИ
- ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФОДРЕНАЖА
- ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ.



### ИК ПРОГРЕВ

- АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФОДРЕНАЖА
- ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ
- УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА МЫШЦ
- УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОСМЕТИКИ
- СТИМУЛЯЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ КОЖИ.

## ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ / ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ

ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ /  
ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ - ОМЫЛЕНИЕ  
ЖИРНЫХ КИСЛОТ КОЖНОГО САЛА  
ПОД ДЕЙСТВИЕМ  
ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ТОКА И  
ЛОСЬОНА-ДЕЗИНКРУСТАНТА.




ЛОСЬОН ДЛЯ ДЕЗИНКРУСТАЦИИ  
ДОПОЛНЯЕТ ДЕЙСТВИЕ  
ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ТОКА И  
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВОДЯЩЕЙ СРЕДОЙ.

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТОКА И ЛОСЬОНА,  
ИДЕТ РЕАКЦИЯ ОМЫЛЕНИЯ  
КОЖНОГО САЛА, КОМЕДОН  
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В МЫЛО И ЛЕГКО  
ВЫМЫВАЕТСЯ ИЗ ПОР.

### РЕЗУЛЬТАТЫ



СОКРАЩЕНИЕ  
ПОР

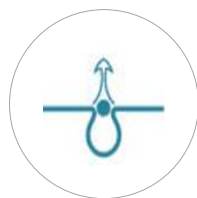

УСТРАНЕНИЕ  
КОМЕДОНОВ



ПРОФИЛАКТИКА  
ВОСПАЛЕНИЙ



УДАЛЕНИЕ  
ЗАГРЯЗНЕНИЙ




НОРМАЛИЗАЦИЯ  
САЛОУДЕЛЕНИЯ



УЛУЧШЕНИЕ  
ЦВЕТА ЛИЦА

## ИОНОФОРЕЗ

ИОНОФОРЕЗ = ВОЗДЕЙСТВИЕ  
ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ТОКОМ  
ПОСРЕДСТВОМ РАЗЛИЧНЫХ  
ЭЛЕКТРОДОВ + КОСМЕТИЧЕСКОЕ  
СРЕДСТВО.

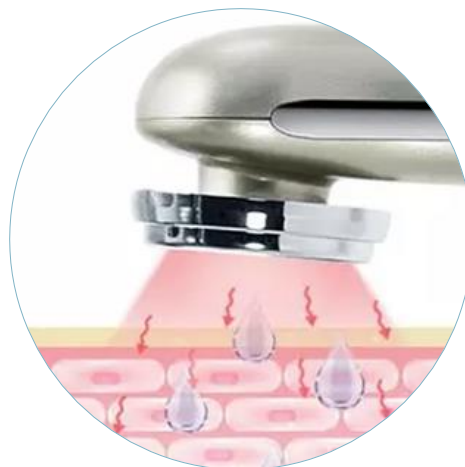

МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДАМИ  
ОБРАЗУЮТСЯ ЗАРЯЖЕННЫЕ ИОНЫ  
НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ,  
КОТОРЫЕ, ПЕРЕДВИГАЯСЬ В  
ТКАНЯХ, УСКОРЯЮТ ОБМЕН  
ВЕЩЕСТВ, ПРОЦЕССЫ  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

## РЕЗУЛЬТАТЫ



УЛУЧШЕНИЕ  
ЦВЕТА ЛИЦА



УВЛАЖНЕНИЕ  
И ПИТАНИЕ  
КОЖИ



УКРЕПЛЕНИЕ  
И ТОНИЗАЦИЯ  
КОЖИ



СОКРАЩЕНИЕ  
ОТЕЧНОСТИ  
ДЕТОКСИКАЦИЯ



УМЕНЬШЕНИЕ  
РАСШИРЕННЫХ  
ПОР



КОРРЕКЦИЯ  
ВОЗРАСТНЫХ  
ИЗМЕНЕНИЙ




АКТИВИЗАЦИЯ  
РЕГЕНЕРАЦИИ



ВЫРАВНИВАНИЕ  
КОЖНОГО  
РЕЛЬЕФА

## ВИБРОМАССАЖ

ВИБРОМАССАЖ  
ОСНОВАН НА ВОЗДЕЙСТВИИ  
ВИБРАЦИИ НА НЕРВНЫЕ  
ОКОНЧАНИЯ КОЖИ, ЧТО  
ВЫЗЫВАЕТ ОТВЕТНУЮ РЕАКЦИЮ  
НЕРВНОЙ, КРОВЕНОСНОЙ И  
ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ.

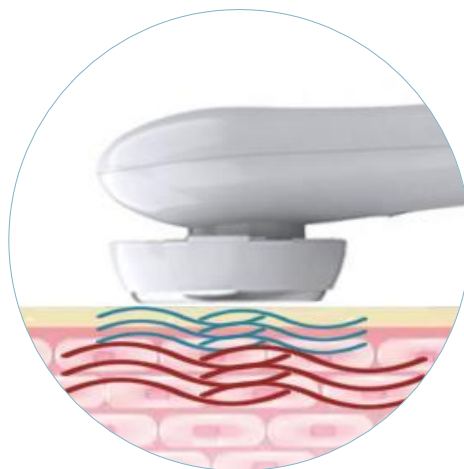

ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА КОЖУ,  
СОСУДЫ И МЫШЕЧНУЮ ТКАНЬ.  
РАСШИРЯЮТСЯ СОСУДЫ,  
ПОВЫШАЕТСЯ ОКСИГЕНАЦИЯ  
ТКАНЕЙ, АКТИВИЗИРУЕТСЯ  
КРОВООБРАЩЕНИЕ И  
ЛИМФОДРЕНАЖ

### РЕЗУЛЬТАТЫ



ДРЕНАЖ  
ДЕТОКСИКАЦИЯ



УСТРАНЕНИЕ  
СПАЗМОВ МЫШЦ



УКРЕПЛЕНИЕ  
ОВАЛА ЛИЦА



ПОВЫШЕНИЕ  
УПРУГОСТИ  
КОЖИ



АКТИВИЗАЦИЯ  
КРОВООБРАЩЕНИЯ



НОРМАЛИЗАЦИЯ  
РАБОТЫ  
САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ




УЛУЧШЕНИЕ  
ЦВЕТА ЛИЦА



## ИК ПРОГРЕВ

ПРОНИКАЮЩЕЕ ТЕПЛО УСТРАНЯЕТ СПАЗМЫ МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ, ЧТО ПОМОГАЕТ СОКРАТИТЬ ГЛУБИНУ МОРЩИН И КОЖНЫХ СКЛАДОК.

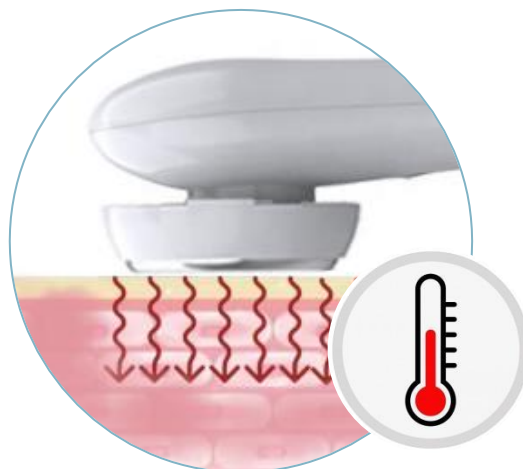

ОБЕСПЕЧИВАЕТ МЯГКИЙ ПРОГРЕВ ТКАНЕЙ НА ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ГЛУБИНУ, ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ НАСЫЩЕНИЯ КЛЕТОК КИСЛОРОДОМ И ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ. СТИМУЛИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, УСИЛИВАЕТ ВЫРАБОТКУ КОЛЛАГЕНА, УКРЕПЛЯЕТ И ПОДТЯГИВАЕТ КОЖУ.

## РЕЗУЛЬТАТЫ



УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ КОЖИ



СОКРАЩЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ



АКТИВИЗАЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ



ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО РЕЛЬЕФА



ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ КОСМЕТИКИ



АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ



УСТРАНЕНИЕ СПАЗМОВ МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



ШНУР USB  
В КОМПЛЕКТЕ



ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ  
3 ЧАСА



- СОЧЕТАЕТ 4 ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.
- ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МЕТОДИК.
- КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛЮБОГО ТИПА.
- ПРИБОР РАБОТАЕТ ОТ АККУМУЛЯТОРА, НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ИСКАТЬ РОЗЕТКУ.
- БЛАГОДАря 5 УРОВНЯМ ИНТЕНСИВНОСТИ МОЖНО ВЫБРАТЬ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНУЮ ПРОГРАММУ КОРРЕКЦИИ.
- КОМФОРТНЫЙ ПРОГРЕВ ДО 45° ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ ДЛЯ НАИБОЛЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
- ПРОСТОТА ИСПОЛЪЗОВАНИЯ: НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ.
- ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА И ВЕС 105 ГРАММ: УДОБНО ДЕРЖАТЬ В РУКЕ.
- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ ОКОЛО 15 МИНУТ.

3

3 РЕЖИМА  
РАБОТЫ



УДОБНО БРАТЬ  
С СОБОЙ

5

5 УРОВНЕЙ  
ИНТЕНСИВНОСТИ



КОМПАКТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ



РАБОТАЕТ ОТ  
АККУМУЛЯТОРА



КОМФОРТНОЕ  
ИСПОЛЪЗОВАНИЕ  
ДОМА

арт. 1301265




## 3 РЕЖИМА РАБОТЫ

### РЕЖИМ DEEP CLEAN / РЕЖИМ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ




- УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ
- УСТРАНЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЗ ПОР
- ОЧИЩЕНИЕ ОТ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК
- РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ САЛООТДЕЛЕНИЯ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- СОКРАЩЕНИЕ РАСШИРЕННЫХ ПОР
- ПОДГОТОВКА К КОРРЕКТИРУЮЩЕМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

### РЕЖИМ FULLY ABSORB / РЕЖИМ ПИТАНИЯ

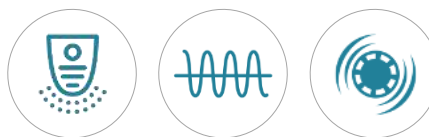

- ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
- ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ И УМЕНЬШЕНИЕ ПОР
- ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КЛЕТОК
- ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО МИКРОРЕЛЬЕФА
- КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
- СОКРАЩЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА

### РЕЖИМ MOISTURE / РЕЖИМ УВЛАЖНЕНИЯ И ЛИФТИНГА

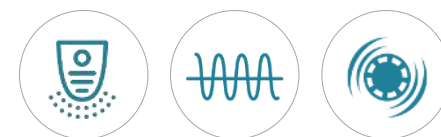

- ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
- УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ
- СОКРАЩЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН
- УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ
- УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ

## ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА



арт. 1301265



ЗАРЯДКА USB  
В КОМПЛЕКТЕ



## КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЦЕДУР

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУР С АППАРАТОМ **GEZATONE BIO SONIC m776** ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА, КОТОРАЯ ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ, ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ И ПОПАДАЕТ «ТОЧНО В ЦЕЛЬ», УСИЛИВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ АППАРАТА И ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ.

### РЕЖИМ DEEP CLEAN

### РЕЖИМ FULLY ABSORB и РЕЖИМ MOISTURE

ЛОСЬОН  
«ДЕЗИНКРУСТАНТ»



4501420AR – 250 мл

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ  
КОМПЛЕКС  
"МОЛОДОСТЬ БЕЗ  
ГРАНИЦ"



4515005K – 5 X 3 мл

АКВА – ГЕЛЬ  
АЛОЭ ВЕРА



4501417AR – 250 мл

КИСЛОРОДНЫЙ  
ГЕЛЬ С  
ГИАЛУРОНОВОЙ  
КИСЛОТОЙ



4501418AR – 250 мл

ГЕЛЬ  
«УЛЬТРАЛИФТ»




4501416AR – 250 мл

ГЕЛЬ С  
ЭКСТРАКТОМ  
ИКРЫ



4504006K – 120 мл

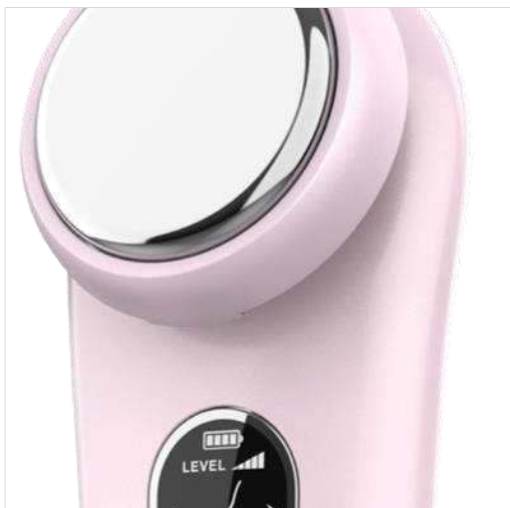

## РЕЗУЛЬТАТЫ\*

- ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ
- СОКРАЩЕНИЕ РАСШИРЕННЫХ ПОР
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА, ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ
- УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН
- ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УВЛАЖНЕННОСТИ И СОКРАЩЕНИЕ ТОНКИХ ЛИНИЙ, ВЫЗВАННЫХ НЕДОСТАТКОМ ВЛАГИ
- УМЕНЬШЕНИЕ ПРИЗНАКОВ УСТАЛОСТИ И СТРЕССА
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА И ТОНА КОЖИ, УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- СОКРАЩЕНИЕ РЕЦИДИВОВ ВОСПАЛЕНИЙ
- НОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ САЛОТДЕЛЕНИЯ

*\* При курсовом использовании прибора 2 раза в год.*

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ СВЫШЕ II Б СТЕПЕНИ
- ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИЛИ ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ: ОЖОГИ, ПОРЕЗЫ, РАНЫ, ССАДИНЫ, ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ.
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ГНОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ, АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- НАРУШЕНИЯ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (БОЛЕВОЙ И ТЕМПЕРАТУРНОЙ)
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ЭПИЛЕПСИЯ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- НАЛИЧИЕ ИМПЛАНТАТОВ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ ПОД КОЖЕЙ ИЛИ В МЫШЦАХ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРОМ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ).
- НАЛИЧИЕ ПОДКОЖНЫХ СИЛИКОНОВЫХ ИМПЛАНТОВ.
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ В ТЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ИНЪЕКЦИЙ БОТОКСА, А ТАКЖЕ ВО ВРЕМЯ КУРСА ИНВАЗИВНЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР.
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ШНУР USB  
В КОМПЛЕКТЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ




- НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ DC 3 ВТ(ОТ ВСТР. АККУМУЛЯТОРА)
- ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 300 МА
- ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА 800МА/Ч ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО DC 5В / 500 МА (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ)
- **ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА:**
  - В МОНОПОЛЯРНЫХ РЕЖИМАХ DEEP CLEAN / FULL ABSORB ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ +/-3.5..12 В
  - В БИПОЛЯРНОМ РЕЖИМЕ MOISTURE +/-6..24В, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСОВ 400МС
- ВИБРОМАССАЖ НЕПРЕРЫВНЫЙ ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ, КРОМЕ MOISTURE (В ЭТОМ РЕЖИМЕ 4 СЕК РАБОТАЕТ, 1 СЕК ПАУЗА)
- ИК ПРОГРЕВ 45° С ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР +15 ... 35°С ПРИ ВЛАЖНОСТИ 20 ... 85%
- РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ 100X160X43 ММ
- СРОК СЛУЖБЫ 5 ЛЕТ





сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

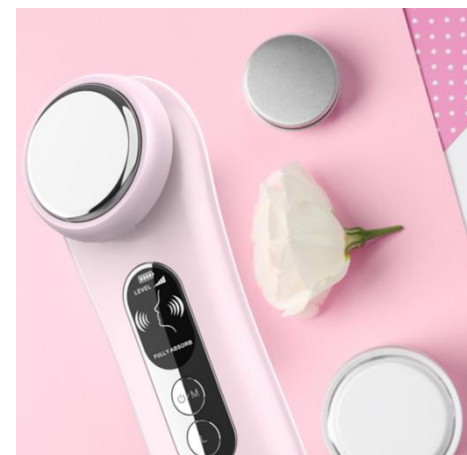

Москва 8 (495) 120-10-80  
регионы РФ: 8(800) 500-95-94  
(звонок бесплатный)



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.sozv.ru/>