



SuperLifting

серии Bio Sonic, модель m356

ПРИБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
С ФУНКЦИЕЙ СВЕТОТЕРАПИИ



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

ПРИБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА С ФУНКЦИЕЙ СВЕТОТЕРАПИИ M356 GEZATONE

Многофункциональный косметический аппарат, о котором мы давно мечтали, теперь доступен для всех, кто хочет сохранить на долго красоту и молодость своего лица и проводить косметические процедуры в домашних условиях.

Компания Gezatone представляет ПРИБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА модель M356, сочетающий ЧЕТЫРЕ ПОПУЛЯРНЫХ МЕТОДИКИ:

- 1** УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФОНОФОРЕЗ – способствует проведению в глубокие слои кожи специальной косметики для увлажнения и питания клеток кожи.
- 2** ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ИОНОФОРЕЗ в сочетании с заряженными косметическими комплексами улучшит внешний вид и состояние кожи.
- 3** ХРОМОТЕРАПИЯ трех цветов комплексно воздействует на различные типы кожи, нормализует состояние жирной кожи, успокоит раздраженную кожу и запустит процессы выработки волокон коллагена и эластина увядающей кожи.
- 4** ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ в сочетании с УЗ-микромассажем подтянет и укрепит кожу, улучшит контур овала лица, снимет отеки, разгладит морщинки.



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



КРУПНЫЕ И МЕЛКИЕ МОРЩИНЫ
В ОБЛАСТИ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ВЕКА,
ТЕМНЫЕ КРУГИ И МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ

РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ, ЖИРНЫЙ БЛЕСК,
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА, КУПЕРОЗ

ТУСКЛЫЙ ТОН КОЖИ
НЕРОВНЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА, ПИГМЕНТАЦИЯ

НЕРОВНЫЙ КОНТУР ОВАЛА ЛИЦА,
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ДРЯБЛОСТЬ КОЖИ

Аппарат рекомендуется для коррекции возрастных изменений кожи и позволит Вам осуществить в домашних условиях высокопрофессиональный уход за кожей с признаками увядания.

Регулярное выполнение простых и не занимающих много времени процедур позволит Вам многократно повысить упругость кожи, восстановить эластичность и тургор, улучшить цвет лица и разгладить морщины.

Аппарат компактен и удобен в использовании и станет Вашим надежным другом на долгие годы.

ЭФФЕКТЫ ОТ РЕГУЛЯРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИБОРА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА С ФУНКЦИЕЙ СВЕТОТЕРАПИИ M356 Gezatone

- ✔ Максимальный эффект подтяжки кожи
- ✔ Разглаживание мелких мимических морщинок и морщин
- ✔ Эффективный массаж кожи
- ✔ Повышение тонуса и упругости кожи
- ✔ Эффективное очищение, питание и увлажнение кожи
- ✔ Уменьшение отечности
- ✔ Нормализация работы сальных желез
- ✔ Осветление пигментации и устранение темных кругов




ФУНКЦИИ ПРИБОРА

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФОНОФОРЕЗ и МИКРОМАССАЖ

Ультразвуковые колебания с частотой ≈ 3 миллиона колебаний в секунду заставляют клетки дермы активно сжиматься и разжиматься с такой же частотой. Такое мягкое волнообразное воздействие ультразвука на ткани эффективно стимулирует и омолаживает кожу, не травмируя ее.

ФОНОФОРЕЗ – методика, обеспечивающая сочетание воздействия ультразвука и косметических препаратов. Благодаря ультразвуку проницаемость кожных покровов, клеточных мембран и стенок сосудов повышается, и активные вещества проникают глубоко в кожу.

- ✔ Мягко и деликатно стимулирует клетки кожи
- ✔ Способствует выработке собственного коллагена и эластина
- ✔ Усиливает микроциркуляцию крови и лимфы
- ✔ Устраняет отечность
- ✔ Подтягивает кожу, повышает упругость и эластичность
- ✔ Улучшает цвет лица
- ✔ Усиливает проникновение косметических средств и повышает их эффективность
- ✔ Разглаживает морщинки и неровности на коже

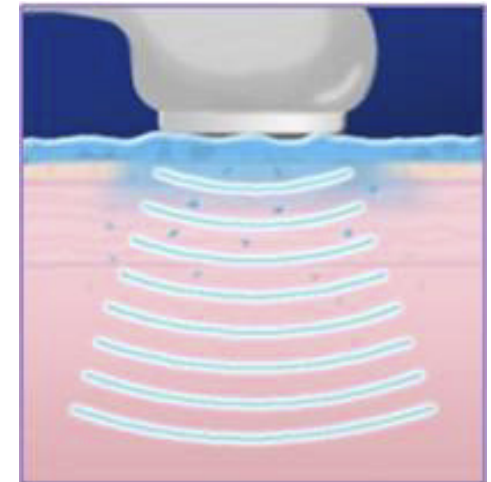

ФУНКЦИИ ПРИБОРА

ИОНОФОРЕЗ


Применение постоянного гальванического тока регулирует обменные процессы, происходящие в коже, улучшает тонус кожи, нормализует деятельность сальных желез, усиливает питание кожи, ее влажность, способность к регенерации, а также стимулирует выработку белков коллагена и эластина клетками-фибробластами. При помощи постоянного гальванического тока можно проводить процедуру ионофореза, т.е. введения в глубокие слои кожи специальных заряженных косметических комплексов, что многократно усиливает их действие.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА "ION-" ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ:

- ✓ повышает тонус дряблой кожи;
- ✓ увлажняет кожу, восстанавливает ее тургор;
- ✓ активизирует тонус сосудов и улучшает цвет лица;
- ✓ стимулирует трофику тканей и кислородное дыхание клеток кожи;
- ✓ усиливает проникновение активных косметических средств в глубокие слои кожи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА "ION+" ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ:

- ✓ снимает повышенный тонус мимических мышц лица
- ✓ разглаживает мимические морщины на лбу, переносице, в уголках глаз, вокруг рта;
- ✓ уменьшает раздражение и воспаление кожи;
- ✓ устраняет отеки и выводит токсины;
- ✓ снимает аллергические реакции, зуд, покраснения кожи;
- ✓ уменьшает проявления купероза, освежает кожу, способствует сужению пор;
- ✓ открывает кожные поры, расщепляет и омыляет кожный жир (себум), тем самым очищая кожу лица.

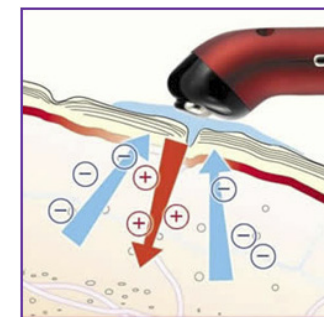

ФУНКЦИИ ПРИБОРА

ХРОМОТЕРАПИЯ – это бесконтактный метод лечения светом и цветом, эффективность которого научно доказана. Он основан на том, что свет, являясь электромагнитным излучением, проникает через ткани и несет необходимую энергию клеткам кожи. Все цвета имеют свое излучение и оказывают различные эффекты.

СВЕТ СИНЕГО СПЕКТРА (460–470нм) оказывает успокаивающее действие и идеально подходит для ухода за чувствительной кожей. Способствует нормализации работы сальных желез, сужению расширенных пор. Предотвращает появления воспалений и акне. Свет синего спектра делает кожу красивой и сияющей здоровьем.



СВЕТ КРАСНОГО СПЕКТРА (620–630нм) достигает глубокие слои дермы, способен стимулировать выработку волокна коллагена и эластина. Улучшает кровообращение, уменьшает морщины и разглаживает кожу. Подходит для любого типа кожи.



СВЕТ ЗЕЛЕННОГО СПЕКТРА (580–590нм) идеально подходит для ухода за кожей смешанного типа. Свет зеленого спектра оказывает успокаивающее действие на кожу и снимает дискомфорт. Великолепно осветляет кожу с пигментацией, выравнивает тон кожи.



ФУНКЦИИ ПРИБОРА

МАССАЖ

Вибрационный массаж (6000–7000 колебаний в минуту) ускоряет процесс циркуляции крови и лимфоток. Снимает отеки и улучшает цвет лица. В сочетании с ультразвуковым микромассажем и хромотерапией при проведении курса процедур можно добиться великолепных результатов.



✓
ТОНИЗАЦИЯ
И ПОВЫШЕНИЕ
УПРУГОСТИ КОЖИ



✓
ПОДТЯЖКА
И УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ,
РАЗГЛАЖИВАНИЕ
МОРЩИН



✓
УСТРАНЕНИЕ
«ВТОРОГО ПОДБОРОДКА»,
ЧЕТКИЙ ОВАЛ ЛИЦА



✓
УМЕНЬШЕНИЕ ДИАМЕТРА
ПОР, ВЫРАВНИВАНИЕ
КОЖНОГО РЕЛЬЕФА,
УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА

ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА



Сетевой адаптер




При проведении процедуры необходимо касаться пальцами боковых контактов

LCD ДИСПЛЕЙ

Sonic	Микромассаж
Ion +	Гальваническое воздействие в режиме плюс
Ion -	Гальваническое воздействие в режиме минус
Massage	Вибрационный массаж
Photon	Световое воздействие
Time	Время работы

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

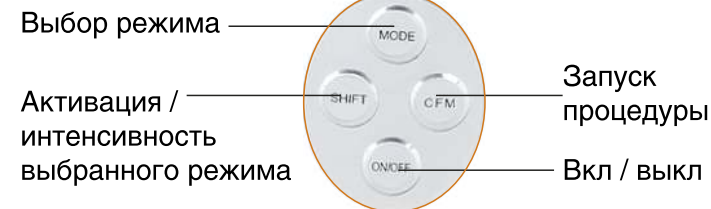

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ФОНОФОРЕЗА



Концентраты для лица
Beauty Style



Сыворотка для лица
с коллагеном
Beauty Style
Арт. 4506003



Сыворотка для лица
с гиалуроновой кислотой
Beauty Style
Арт. 4505010



Сыворотки для лица
Beauty Style

ДЛЯ ИОНОФОРЕЗА ЗАРЯЖЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ BEAUTY STYLE



лифтинговый
Арт. 4515004



омолаживающий
Арт. 4515005



увлажняющий
Арт. 4515003



противокуперозный
Арт. 4515001

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

В РЕЗУЛЬТАТЕ КУРСА ПРОЦЕДУР БЛАГОДАРЯ СОЧЕТАНИЮ МЕТОДИК НЕ ТОЛЬКО ВЫ, НО И ВАШИ БЛИЗКИЕ ЗАМЕТЯТ, КАК ПОХОРОШЕЛО ВАШЕ ЛИЦО:

- ✔ произойдет лифтинг лица и шеи
- ✔ кожа станет более ровной, упругой и эластичной
- ✔ глубина и количество морщин уменьшатся
- ✔ активные компоненты специальных косметических средств проникнут в глубокие слои кожи, дадут полноценное питание и увлажнение
- ✔ контуры овала лица станут более четкими
- ✔ цвет лица улучшится, поры станут менее заметными
- ✔ кожные покровы очистятся от шлаков и токсинов



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- ❑ ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- ❑ ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ❑ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ❑ ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ (ОСОБЕННО ГНОЙНЫЕ)
- ❑ ОСТРЫЙ ПЕРИОД ТРАВМЫ, ССАДИНЫ, РАНЫ
- ❑ ОБОСТРЕНИЯ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ЭКЗЕМЫ, ДЕРМАТИТА, ИЗЪЯЗВЛЕНИЙ КОЖИ, ТРЕЩИН)
- ❑ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ
- ❑ ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА И ИМПЛАНТАТЫ, РАСПОЛАГАЮЩИЕСЯ ПОД КОЖЕЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аппарата:

Прибор для ухода и массажа лица Gezatone «Superlifting», модель m356 серия Bio Sonic, бытовой электрический

Напряжение питания: DC 15 В.

Сетевой адаптер: AC 220 В., 50 Гц./ DC15 В., 400 мА
(или 800 мА)

Диапазон рабочих температур: +18...35°С при относительной влажности 20...80%

Частота колебаний в режиме микромассажа:
3 МГц +/- 5%

Длины волны светового излучения: 620–630 нм, 460–470 нм, 580–590 нм.

Частота колебаний в режиме механической вибрации: 6–7 кГц

Установки таймера: 1–19 мин.

Выходной ток в режиме ионофореза: 0,35–0,9 мА (на нагрузке 1 кОм).

Габариты в упаковке: 238x228x68 мм

Вес: 750 г.

Изготовитель: «Gezanne I.T.C.» / «Жезанн И.Т.С.», адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France, / Сент Авертен 39 рю де Гранж Галан, Франция.

Филиал завода-изготовителя: «GREAT CATHAY PRODUCTS MFG. INC.» / «ГРЭЙТ КЭТЭЙ ПРОДАКТС МФГ. ИНК» адрес: 2 fl., No. 19, Lane 160, SUNG-CHIANG RD. Taipei, Taiwan R.O.C., / 2фл, Но. 19, Лэйн 160, Санг-Чианг Рд, Тайпей, К.Р., Тайвань.

Импортер/уполномоченная изготовителем организация: ООО «Митридат», Россия, г. Москва, ул. Шоссейная, д.1В, стр. 10 тел. (495) 225-25-83

Дата производства: см. на инструкции.

Срок службы 5 лет.





сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

Москва 8 (495) 120-10-80

регионы РФ: 8 (800) 500-95-94 (звонок бесплатный)

WWW.SOZV.RU

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:

 odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty

 facebook.com/sozvezdiekrasoti

 vk.com/sozvezdiekrasoti

Арт. 1302091S

