



GEZATONE

ФОТОЭПИЛЯТОР

IPL ICE300

КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС

РЕЖИМ «ЛЕДЯНОЕ КАСАНИЕ»

300000 ВСПЫШЕК

5 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ



ФОТОЭПИЛЯТОР **IPL ICE300** С ФУНКЦИЕЙ «ЛЕДЯНОГО КАСАНИЯ» ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ КОЖИ ВО ВРЕМЯ ЭПИЛЯЦИИ, ПОМОЖЕТ КОМФОРТНО УДАЛИТЬ ВОЛОСЫ НА ЛЮБОМ УЧАСТКЕ ЛИЦА И ТЕЛА БЫСТРО, С КОМФОРТОМ И ЭФФЕКТИВНО. ОСТАНУТСЯ ДОВОЛЬНЫ ДАЖЕ САМЫЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ!



ОЧЕНЬ
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ
КОЖА



КОЖА НЕГАТИВНО
РЕАГИРУЕТ НА БРИТЬЕ
И КРЕМЫ ДЛЯ
ДЕПИЛЯЦИИ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОСКА БОЛЕЗНЕННО
И ВЫЗЫВАЕТ
РАЗДРАЖЕНИЕ



ВОЛОСЫ ВРАСТАЮТ
ПОСЛЕ
ТРАДИЦИОННЫХ
МЕТОДОВ ДЕПИЛЯЦИИ



УДАЛЕНИЕ ВОЛОС
ЭПИЛЯТОРОМ
ОЧЕНЬ
БОЛЕЗНЕННО



ФОТОЭПИЛЯТОР IPL ICE300

КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

GÉZATONE

БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

.....

РУКИ ~ 3 МИНУТЫ



ПОДМЫШКИ ~ 3 МИНУТЫ



СПИНА ~ 12 МИНУТ



ОБЛАСТЬ НАД ГУБОЙ 1 МИНУТА



НОГИ ~ 10 МИНУТ



БИКИНИ ~ 2 МИНУТЫ



Арт. 1301239



ООО «ФОРМУЛА КОСМЕТИКИ»


СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ




КАК ЭТО РАБОТАЕТ




ФОТОЭПИЛЯЦИЯ - УДАЛЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС ЗА СЧЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНТЕНСИВНОГО ИМПУЛЬСНОГО СВЕТА (IPL). ВСПЫШКИ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ДЛИНЫ, ЧАСТОТЫ И МОЩНОСТИ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА ВОЛОСКИ И ВОЛОСЯНЫЕ ФОЛЛИКУЛЫ.

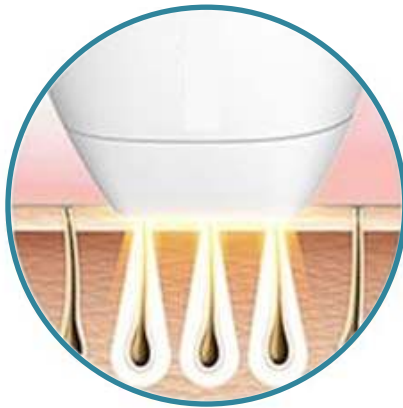

ЭНЕРГИЯ СВЕТОВЫХ ИМПУЛЬСОВ ПОГЛОЩАЕТСЯ МЕЛАНИНОМ ВОЛОСА И ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В ТЕПЛО. ПО СТЕРЖНЮ ВОЛОСА ТЕПЛО ПЕРЕДАЕТСЯ В ВОЛОСЯНОЙ ФОЛЛИКУЛ.

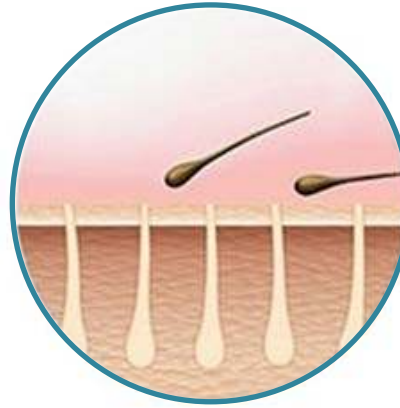

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ОБЛАСТИ ВОЛОСЯНОГО ФОЛЛИКУЛА ВЫЗЫВАЕТ ЕГО РАЗРУШЕНИЕ И ГИБЕЛЬ ВОЛОСА.

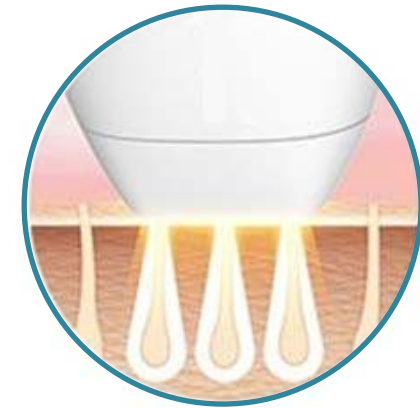

ПОВТОРНЫЕ СЕАНСЫ ПОЗВОЛЯЮТ ОБРАБОТАТЬ ВОЛОСЫ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДВЕГЛИСЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ И НАРУШИТЬ ЦИКЛ РОСТА ДРУГИХ ВОЛОС.






КАК ЭТО РАБОТАЕТ

.....

ПОЧЕМУ НУЖНЫ ПОВТОРНЫЕ СЕАНСЫ

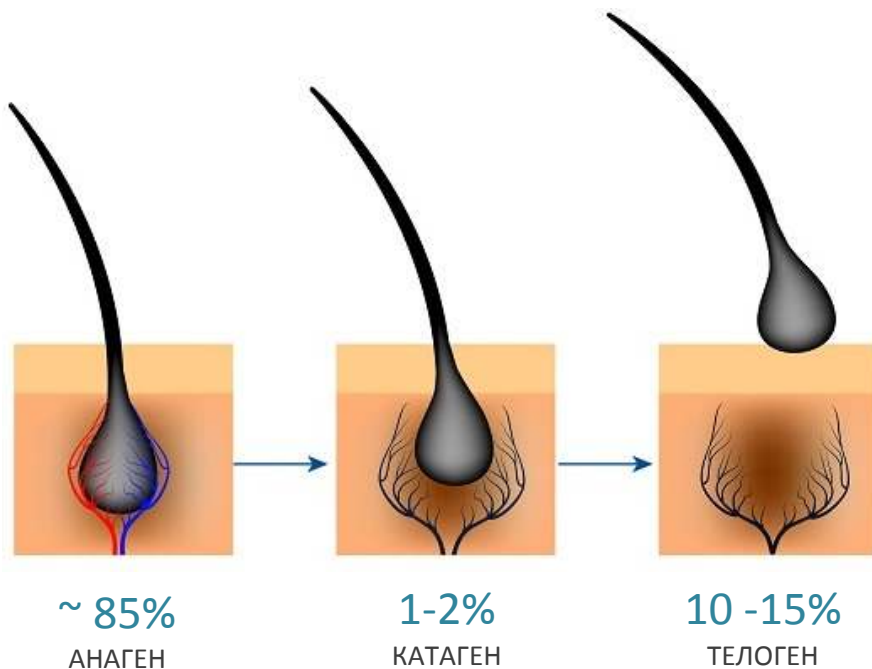

- **ФОТОЭПИЛЯЦИЯ** ЭФФЕКТИВНА В ОТНОШЕНИИ ВОЛОС, НАХОДЯЩИХСЯ В АКТИВНОЙ ФАЗЕ РОСТА (АНАГЕН), И НЕ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ВОЛОСЫ В ПЕРЕХОДНОЙ ФАЗЕ И ФАЗЕ ПОКОЯ, ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНЫХ СЕАНСОВ.
- ВОЛОСКИ, НЕ ДОСТИГШИЕ ФАЗЫ АНАГЕНА, ОСТАЮТСЯ НЕТРОНУТЫМИ, ТАК КАК СВЕТОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ НЕ ДОСТИГАЮТ ВОЛОСЯНОГО Фолликула.
- ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ВОЛОСЫ, НЕ ПОДВЕРГШИЕСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ, ВЫРАСТАЮТ И ВОЗНИКАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ В ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ.




КТО МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

.....

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН С ФОТОТИПАМИ **I – IV**

ДЛЯ **V** и **VI** ФОТОТИПОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО АППАРАТА ПРОТИВОПОКАЗАНО.

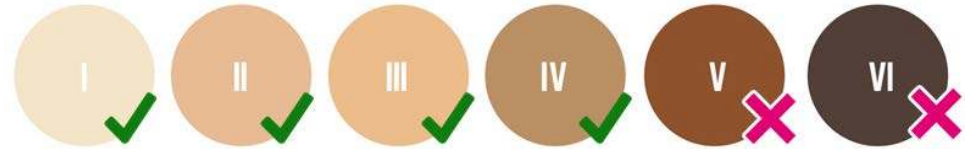

ПРИБОР **НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ** ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЕДЫХ, ОЧЕНЬ СВЕТЛЫХ И РЫЖИХ ВОЛОС ПО ПРИЧИНЕ НЕДОСТАТКА МЕЛАНИНА.





ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



УДОБНО БРАТЬ С СОБОЙ

Арт. 1301239

- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:** ПРИБОРОМ МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, КАК ЖЕНЩИНЫ, ТАК И МУЖЧИНЫ.
- **ЭФФЕКТИВНОСТЬ IPL** МЕТОДА ПОДТВЕРЖДЕНА МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ ПРИМЕНЕНИЯ
- **БЕЗОПАСНОСТЬ:** НАЛИЧИЕ ВСТРОЕННОГО **ДАТЧИКА КОНТАКТА С КОЖЕЙ**
- **БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ:** РЕЖИМ «ЛЕДЯНОГО КАСАНИЯ», ОХЛАЖДЕНИЕ +10 С
- МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ **ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА**
- **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:** ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ НЕСКОЛЬКО МИНУТ
- РЕСУРС ЛАМПЫ **300000** ВСПЫШЕК
- **5 УРОВНЕЙ** РЕГУЛИРОВКИ ИНТЕНСИВНОСТИ ВСПЫШКИ
- ПЛОЩАДЬ ОКНА **2,7 см²**
- **УДОБСТВО:** МОЖНО БРАТЬ С СОБОЙ
- **НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ** ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



ТЕХНОЛОГИЯ
IPL



ДЛЯ ЛИЦА
И ТЕЛА




2 РЕЖИМА:
РУЧНОЙ И
АВТОМАТИЧЕСКИЙ



300000
ВСПЫШЕК



РЕЖИМ
«ЛЕДЯНОГО
КАСАНИЯ»

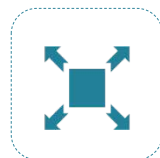

ПЛОЩАДЬ
ОКНА
2,7 см²



5 УРОВНЕЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ



СЕНСОРНЫЙ
ДАТЧИК
КОНТАКТА



ДЛЯ МУЖЧИН
И ЖЕНЩИН






5 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ВСПЫШКИ



УРОВНИ 1, 2, 3
МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ДЛЯ ФОТОТИПОВ I, II, III, IV

УРОВНИ 4 и 5
МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ТОЛЬКО ДЛЯ ФОТОТИПОВ I и II

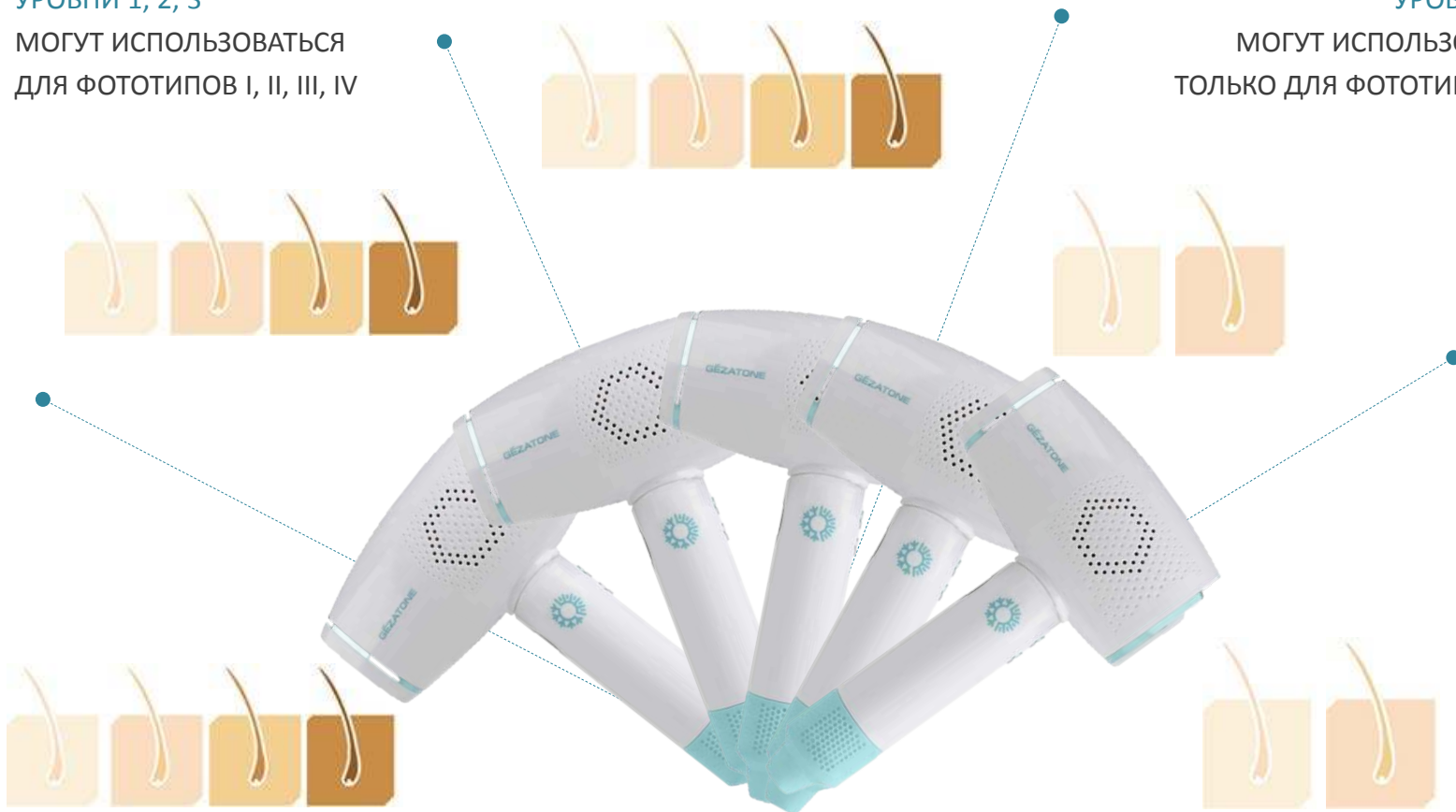

РЕЖИМ «ЛЕДЯНОГО КАСАНИЯ»

СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ до + 10°C

ЛИЦО



ЗОНА БИКИНИ



ПОДМЫШКИ



- ПРИЯТНЫЙ ХОЛОДОК ПОСЛЕ ЭПИЛЯЦИИ: МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ
- РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕЛИКАТНЫХ ОБЛАСТЕЙ И УЧАСТКОВ С НЕЖНОЙ КОЖЕЙ.
- ДЛЯ БЫСТРОГО УСТРАНЕНИЯ ДИСКОМФОРТНЫХ ОЩУЩЕНИЙ НА КОЖЕ





2 РЕЖИМА



АВТОМАТИЧЕСКИЙ

РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВСПЫШЕК



ПРИ ПОЛНОМ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ И НЕПРЕРЫВНОМ ДВИЖЕНИИ, ИМПУЛЬСЫ ГЕНЕРИРУЮТСЯ С РАВНЫМИ ВРЕМЕННЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ. ОПТИМАЛЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ УЧАСТКОВ.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ:

РУКИ



СПИНА



НОГИ



«РУЧНОЙ»

РЕЖИМ ТОЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ



ПРИ ПОЛНОМ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ И НАЖАТИИ КНОПКИ ГЕНЕРИРУЕТСЯ ОДИНОЧНЫЙ ИМПУЛЬС. ЗАТЕМ ПРИБОР ПЕРЕСТАВЛЯЕТСЯ НА ДРУГУЮ ОБЛАСТЬ И ГЕНЕРИРУЕТСЯ НОВЫЙ ИМПУЛЬС

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ:

ПОДМЫШКИ



ЛИЦО*



БИКИНИ



*на лице эпилятор используется только в области ниже скулы





ФОТОЭПИЛЯТОР IPL ICE300

КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

GÉZATONE

РЕЗУЛЬТАТЫ



БЕЗ БОЛИ И
НЕПРИЯТНЫХ
ОЩУЩЕНИЙ



ЭФФЕКТИВНО



БЫСТРО



С
КОМФОРТОМ



БЕЗОПАСНО



НА ЛЮБЫХ
УЧАСТКАХ




ООО «Фирма «ГЕЗАТОН»

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



ВНЕШНИЙ ВИД

.....

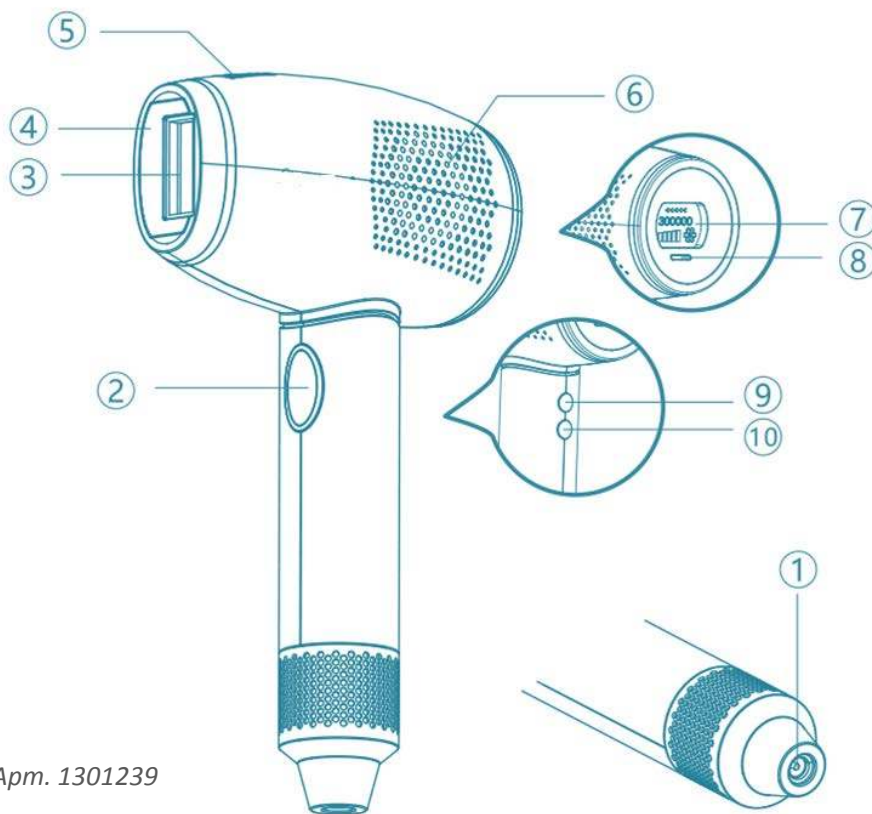

- 1 ГНЕЗДО ПИТАНИЯ
- 2 КНОПКА ГЕНЕРАЦИИ ВСПЫШКИ
- 3 ОКНО ЛАМПЫ
- 4 ПАНЕЛЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (В РЕЖИМЕ «ЛЕДЯНОЕ КАСАНИЕ»)
- 5 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВЫХОДА ВОЗДУХА
- 6 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ЗАБОРА ВОЗДУХА
- 7 ИНДИКАТОР УРОВНЯ МОЩНОСТИ
- 8 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР
- 9 КНОПКА ICE – ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ
- 10 КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА / ВЫБОРА УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ

Арт. 1301239





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Арт. 1301239



- БЛОК ПИТАНИЯ:
- Вход: $\approx 100-240$ В 50-60 Гц 1,5 А Выход: ≈ 12 В 5А
- МОЩНОСТЬ ВСПЫШКИ: 2,5 – 5 Дж/см²
- РАЗМЕР ОКНА ЛАМПЫ: 0,9 см x 3 см (2,7 см²)
- ДЛИНА ВОЛНЫ: 475-1200 нм
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВСПЫШКИ: 500-800 мс
- РЕСУРС ЛАМПЫ: 300.000 вспышек
- ВЕС: 1,1 кг
- РАЗМЕР: 180x210x100 мм



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ВОЗРАСТ ДО 18 ЛЕТ
- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- ЭПИЛЕПСИЯ, ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ СВЫШЕ II Б СТЕПЕНИ
- В ТЕЧЕНИЕ 8 НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ ШЛИФОВКИ, ХИМИЧЕСКИХ ПИЛИНГОВ, А ТАКЖЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОСМЕТИЧЕСКИХ ИЛИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ АНА И ВНА КИСЛОТ, РЕТИНОИДОВ, ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПОВЫШАЮЩИХ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ.
- ПЕРИОД АКТИВНОГО ПОСЕЩЕНИЯ СОЛЯРИЯ ИЛИ ЗАГАРА НА СОЛНЦЕ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ: ОЖОГИ, РАНЫ, ССАДИНЫ, ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ, СКЛОННОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ГНОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ, АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ФОТОТИПЫ КОЖИ V И VI
- ПРИЕМ ДЕРМАТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ (НАПРИМЕР, РОАКУТАН)
- ТАТУИРОВКИ, РОДИМЫЕ ПЯТНА В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8 (800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>