

**GÉZATONE**



# BIOSONIC 800

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА


ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ • РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН • ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ • ОСВЕТЛЕНИЕ КОЖИ

# BIOSONIC 800

# GÉZATONE

## УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

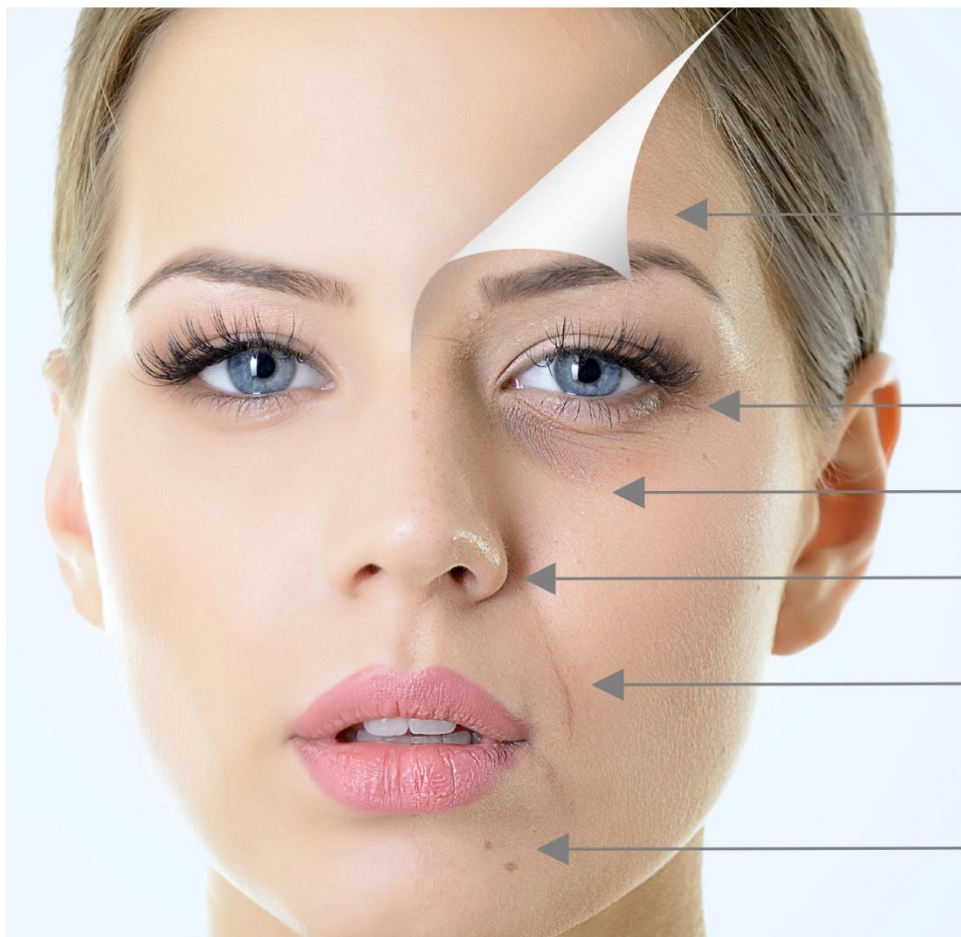

МОРЩИНЫ НА ЛБУ И ПЕРЕНОСИЦЕ,  
«УСТАВШАЯ» КОЖА

МОРЩИНКИ ВОКРУГ ГЛАЗ

НЕРОВНЫЙ ТОН ЛИЦА, ТЕМНЫЕ КРУГИ

КОМЕДОНЫ, РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ,  
ЖИРНЫЙ БЛЕСК КОЖИ

СУХОСТЬ И ШЕЛУШЕНИЕ КОЖИ,  
НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ

ПИГМЕНТАЦИЯ  
И ВОСПАЛЕНИЯ НА КОЖЕ


# BIOSONIC 800

GÉZATONE

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

## ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

- ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ И ПИЛИНГ
- ОТШЕЛУШИВАНИЕ ОРОГОВЕВШИХ ЧАСТИЧЕК И УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА КОЖИ И ОСВЕТЛЕНИЕ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН
- УДАЛЕНИЕ КОМЕДОНОВ (ЧЕРНЫХ ТОЧЕК)
- СОКРАЩЕНИЕ ДИАМЕТРА ПОР
- УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ КОЖИ
- ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ МАССАЖ И РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН
- СНЯТИЕ ОТЕКОВ И ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ

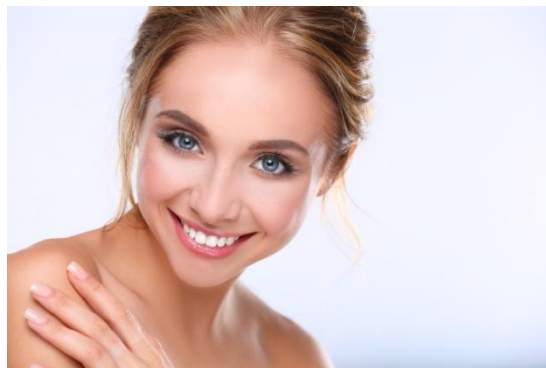

# BIOSONIC 800

# GÉZATONE

## УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

### ФУНКЦИИ ПРИБОРА И МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

#### 1. ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

**Чистка (CLEAN)** - программа уменьшения количества кожного себума и загрязнений с поверхностных слоев кожи.

Специальные силиконовые насадки в сочетании с косметическим средством мягко и деликатно очистят кожу от загрязнений и макияжа.



### ФУНКЦИИ ПРИБОРА и МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ


#### 2. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ



Деликатное  
удаление  
старых,  
отмерших  
клеток кожи



Эмульгирование  
и удаление грязи,  
комедонов из пор

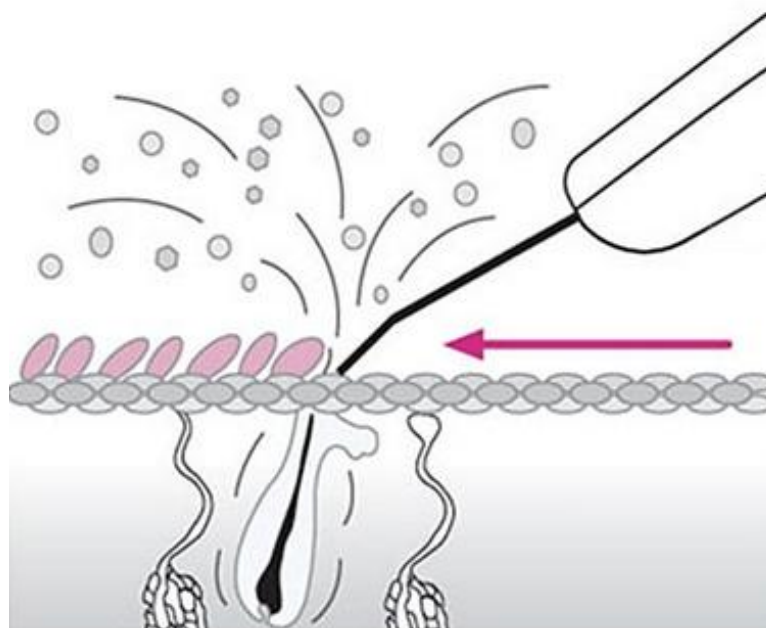

Очистка  
и выравнивание  
поверхности кожи

Ультразвуковая волна  
превращает очищающую  
жидкость в активную  
мелкодисперсную  
эмульсию

Пилинг (PEEL) - процедура глубокого очищения кожи, удаления ороговевших клеток эпидермиса, комедонов и шлифовки кожи, уменьшения количества кожного себума с одновременным увлажнением и обогащением кислородом поверхностных слоев кожи. Глубокое очищение кожи в сочетании со специальными гелями приводит к выраженному улучшению цвета лица, а также способствует ее омоложению.

### ФУНКЦИИ ПРИБОРА и МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

#### 3. МИКРОМАССАЖ

Микромассаж оказывает на кожу несколько положительных эффектов:

- *Механический эффект* – осуществляется за счет передачи ультразвуковых колебаний через тонкий слой косметического средства на водной основе (геля или лосьона), нанесенного на поверхность кожи, запускает процесс регенерации клеток кожи, оказывает «разволокняющее» действие, которое способствует повышению эластичности рубцовой ткани. Происходит активная подтяжка кожи лица, шеи и декольте благодаря глубокому микромассажу на клеточном уровне.
- *Тепловой эффект* – связан с превращением в тканях акустической энергии в тепло, что улучшает микроциркуляцию, снимает мышечный спазм и ускоряет биохимические реакции и синтез белков молодости – коллагена и эластина.
- *Бактерицидный эффект* – стимулирует местный клеточный иммунитет и повышает защитные свойства кожи.




### ФУНКЦИИ ПРИБОРА и МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

#### 4. ФОНОФОРЕЗ



Ультразвуковая волна обеспечивает глубокое проникновение косметических средств за счет превращения их в активную мелкодисперсную эмульсию

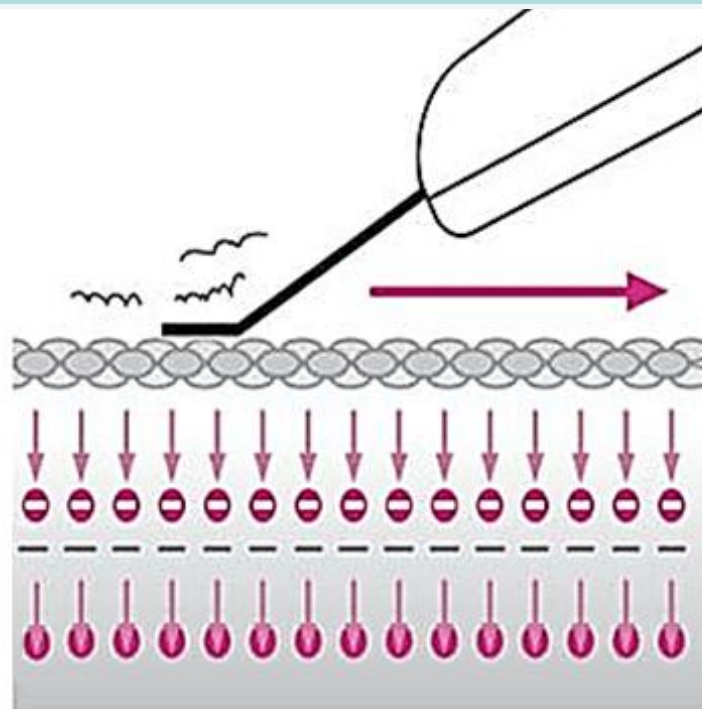

Упругая и эластичная поверхность кожи

Ультразвуковой микромассаж тонизирует кожу

**Тонизация (TONE)** - процедура ультразвукового микромассажа кожи, активизирующая кровообращение и обменные процессы внутри клеток, совмещенная с функцией фонофореза косметических препаратов.

**Фонофорез** - методика воздействия ультразвуком, способствующая проникновению в глубокие слои кожи активных ингредиентов косметических средств.

## УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА


### ФУНКЦИИ ПРИБОРА и МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

#### 5. ЛИФТИНГ

В режиме Лифтинг (LIFTING) - подтяжки кожи, снимается "привычный мышечный спазм", формирующий морщины. Прибор генерирует заряженные ионы, которые способствуют сужению пор, повышению эластичности кожи, уменьшению морщин.



Лекарство  
Кожа  
Сосуды крови

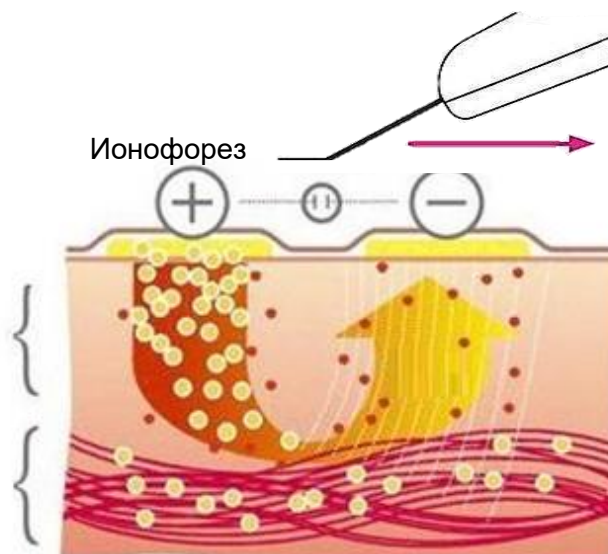

В этом режиме проводятся процедуры ионофореза, т.е. проведение в глубокие слои кожи специальной заряженной косметики. Во время процедуры держать прибор необходимо так, чтобы пальцы находились на специальных металлических вставках по бокам прибора.



# BIOSONIC 800

GEZATONE

## УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРА

В салонах красоты и косметологических клиниках ультразвуковые методики используются более 15 лет. Сегодня, благодаря современному аппарату Gezatone BIOSONIC 800 Вы можете проводить процедуры по уходу за кожей лица в домашних условиях.

В основе действия прибора лежит метод деликатного ультразвукового воздействия, которое не травмирует, не растягивает и не деформирует кожу лица. С помощью прибора Gezatone BIOSONIC 800 Вы не выходя из дома можете провести полный комплекс косметических процедур, включающий:

1. Очищение и ультразвуковой пилинг лица
2. Увлажнение и питание кожи
3. Снятие отеков и лифтинг кожи
4. Осветление кожи и удаление пигментных пятен
5. Разглаживание морщин, повышение тонуса и эластичности кожи



# BIOSONIC 800

# GÉZATONE



## УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРА

Ультразвуковой прибор для ухода за кожей лица BIOSONIC 800 основан на генерации регулируемого по интенсивности ультразвукового сигнала с частотой **25 КГц**, вызывающего невидимые глазом колебания рабочего инструмента аппарата – тонкой металлической лопаточки.

Ультразвуковая терапия обладает омолаживающим действием на кожу, дает прекрасный эффект лифтинга лица, стимулирует кровообращение, снимает отеки.

Уникальность действия ультразвука состоит в том, что он не деформирует поверхность кожи, а проходит вглубь и осуществляет микромассаж тканей на уровне клетки.

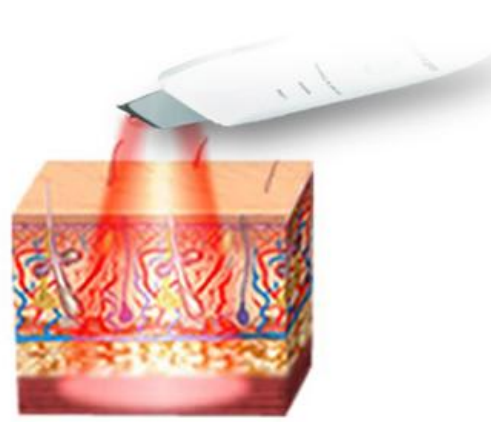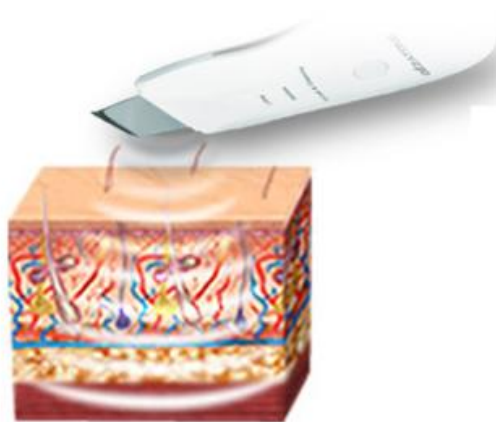

# BIOSONIC 800

GÉZATONE

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Режим Лифтинг  
(LIFTING)



Lifting

Режим Питание  
(NUTRITION)



Nutrition

Режим Мягкий пилинг и очищение  
(SOFT PEEL & CLEANSING)



Soft peel & Cleansing



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

# BIOSONIC 800

# GEZATONE

## УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРА

**Прибор BIOSONIC 800 Gezatone имеет 5 функций и 2 режима воздействия:**

постоянный ультразвук и импульсный режим, так что каждый пользователь сможет подобрать для себя наиболее комфортное сочетание функций и воздействий.

Ультразвуковой прибор для ухода за кожей лица BIOSONIC 800 Gezatone очень прост и удобен в применении, а главное комфортен и безопасен в использовании. При работе с прибором не требуется специальных навыков, достаточно лишь соблюдать инструкцию и правильно подбирать специальную аппаратную косметику, а полученный результат приятно удивит не только Вас, но и Ваших близких. BIOSONIC 800 позволит Вам проводить комплексный косметологический уход в домашних условиях, экономя при этом деньги и время.



УНИВЕРСАЛЬНО



БЫСТРО



ЭФФЕКТИВНО



УДОБНО



РЕЗУЛЬТАТИВНО



БЕЗОПАСНО



ВЫГОДНО



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

# BIOSONIC 800

# GÉZATONE

## УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

### СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Режим воздействия	Для жирной проблемной кожи	Для сухой кожи	Для возрастной кожи
<b>CLEANSING</b>	Очищающий гель "КОНТРОЛЬ" Beauty Style 	Увлажняющий крем-пилинг «Аква 24» Beauty Style 	Крем-пилинг со стволовыми клетками органы Beauty Style 
<b>SOFT PEEL</b>	Гель для УЗ-пилинга «Ультраклин контроль» Beauty Style 	Очищающий пилинг-гель «Холодное Гидрирование» «Аква 24» Beauty Style 	Гель для УЗ-пилинга «Ультраклин сенс» Beauty Style 
<b>NUTRITION</b>	Гель «Аква-гель АЛОЭ ВЕРА» Beauty Style 	Кислородный гель с гиалуроновой кислотой Beauty Style 	Гель «УЛЬТРАЛИФТ» Beauty Style 
<b>LIFTING</b>	Лифтинговый комплекс Beauty Style «Совершенство» 5 шт. * 3 мл (заряд "-") 	Увлажняющий комплекс Beauty Style «Кристалльный родник» 5шт. * 3 мл (заряд "-") 	Омолаживающий комплекс Beauty Style «Молодость без границ» 5шт. * 3 мл (заряд "-") 

## УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Нарушения сердечного ритма (аритмия), носящие приступообразный характер (мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия)
- Недостаточность кровообращения свыше II Б степени
- Болезни крови, тромбофлебиты
- Ношение электрокардиостимулятора или других электронных имплантатов
- Онкологические заболевания кожи
- Нарушение целостности кожных покровов – раны, ссадины, трофические язвы
- Острые воспалительные и гнойные процессы
- Нарушения кожной чувствительности в результате травмы или заболевания нервов
- Психические заболевания
- Период беременности
- Наличие имплантатов, располагающихся под кожей или в мышцах (золотые нити, металлические послеоперационные скобки), не распространяется на зубные коронки, штифты и брекететы
- Плохое самочувствие пациента (рекомендуется перенести проведение процедуры)
- Нельзя проводить процедуры с помощью аппарата на следующих зонах: глаза, область над сердцем и щитовидной железой, над силиконовыми имплантатами, в областях с гелевой контурной пластикой



# BIOSONIC 800

# GEZATONE

## УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Название модели: BioSonic 800 Прибор ультразвуковой Gezatone
- Артикул: 1301182
- Частота ультразвука: 25 кГц
- Выходная мощность ультразвуковых колебаний: не более 0,8 Вт/см<sup>2</sup>

#### ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛОВ:

##### SOFT PEEL & CLEANSING

- Напряжение на электроде (постоянный ток): 0,7...-1,0 В. (не зависит от уровня мощности ультразвука)
- Длительность импульса ультразвука в режиме низкой мощности: 0,8 мс.
- Длительность импульса ультразвука в режиме высокой мощности: 19,2 мс.

##### NUTRITION

- Напряжение на электроде (постоянный ток): +0,7...+1,0 В. (не зависит от уровня мощности ультразвука)
- Длительность импульса ультразвука в режиме низкой мощности: 0,9 мс.
- Длительность импульса ультразвука в режиме высокой мощности: 7,3 мс.

##### LIFTING

- Напряжение на электроде (двуполярные импульсы частотой  $\approx 1...1,5$  Гц): +/-1,4... 2,0 В. (не зависит от уровня мощности ультразвука)
- Длительность импульса ультразвука в режиме низкой мощности: 0,8 мс.
- Длительность импульса ультразвука в режиме высокой мощности: 11,6 мс.
- Напряжение питания, тип встроенного аккумулятора литий-полимерная, 3,7 В/600мА\*ч
- Время полной зарядки: 2,5 часа
- Выходные параметры зарядного устройства: DC 5В/, не менее 500мА (в комплект не входит) разъем USB, тип А
- Температура хранения: от +15С° до +30С°
- Допустимая влажность: не более 70%
- Размер в упаковке: (ДхГхВ) 210x150x35 мм
- Вес в упаковке: 0,3 кг
- ШК: 3004564030081



# GÉZATONE



сеть фирменных магазинов

## СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

Москва: 8 (495) 120 10 80

Регионы РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный)

[www.sozv.ru](http://www.sozv.ru)

**ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:**



[www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty](http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty)



[facebook.com/sozvezdiekrasoti](https://facebook.com/sozvezdiekrasoti)



[vk.com/sozvezdiekrasoti](https://vk.com/sozvezdiekrasoti)