

модель **Bio Sonic**

HS2307i

аппарат для

**УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ**

кожи лица

- Глубокое, деликатное и эффективное очищение кожи
- Омолаживающий массаж кожи на клеточном уровне
- Разглаживание морщин, повышение тонуса и упругости кожи лица

**GÉZATONE**

# АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ ЛИЦА Bio Sonic HS2307i Gezatone

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ЖИРНАЯ КОЖА С РАСШИРЕННЫМИ ПОРАМИ
- УВЯДАЮЩАЯ КОЖА СО СНИЖЕННЫМ ТОНУСОМ
- НАЛИЧИЕ ОРОГОВЕВШИХ ЧАСТИЧЕК
- КОМЕДОНЫ, ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ, САЛЬНЫЕ ПРОБКИ
- ОБЕЗВОЖЕННАЯ КОЖА
- ШЕЛУШЕНИЕ
- ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА
- АКНЕ, ПРЫЩИ, ВОСПАЛЕНИЯ



# АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ ЛИЦА Bio Sonic HS2307i Gezatone

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Современные методы очищения лица с применением аппарата для ультразвуковой чистки **Gezatone HS2307i** позволяют практически мгновенно добиться результата, не вызывая неприятных или болезненных ощущений во время и после процедуры, превращая процедуру в одну из самых приятных и комфортных.

### УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА ЛИЦА СПОСОБСТВУЕТ:

- моментальному улучшению цвета лица;
- глубокому очищению кожи, от загрязнений и черных точек;
- питанию и увлажнению;
- разглаживанию рельефа и лифтингу кожи;
- укреплению и приданию коже упругости и эластичности.

**GEZATONE**

ВАМ  
ЗНАКОМЫ  
ЭТИ  
КОСМЕТИЧЕСКИЕ  
НЕДОСТАТКИ?



ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ,  
(комедоны)



СУХОСТЬ И ШЕЛУШЕНИЕ



РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ  
ЖИРНАЯ КОЖА

НЕРОВНЫЙ ТОН ЛИЦА  
ПИГМЕНТАЦИЯ



МОЩИНЫ

АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ ЛИЦА  
Bio Sonic HS2307i Gezatone

ВЫ ХОТИТЕ ЧТОБЫ БЫЛО ТАК?

Аппарат для  
ультразвуковой  
чистки лица  
Gezatone HS2307i  
поможет  
деликатно,  
эффективно  
и комфортно  
достичь  
желаемых  
результатов.




**GEZATONE**

# АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ ЛИЦА Bio Sonic HS2307i Gezatone

## ФУНКЦИИ ПРИБОРА И ИХ ДЕЙСТВИЕ

**Ультразвуковая чистка (пилинг)** - это эффективное и деликатное, очищение кожи от поверхностных загрязнений и ороговевших частичек.

- Ультразвуковая волна приводит в движение контактную среду (гель) которая мягко деликатно и эффективно отшелушивает ороговевшие частички, устраняет загрязнения из пор и с поверхности кожи.
- Такая процедура проводится 1-3 раза в неделю в зависимости от типа и состояния кожи
- Кожа становится более гладкой и чистой, подготовленной к активному уходу.
- Усиливаются процессы дыхания кожи.

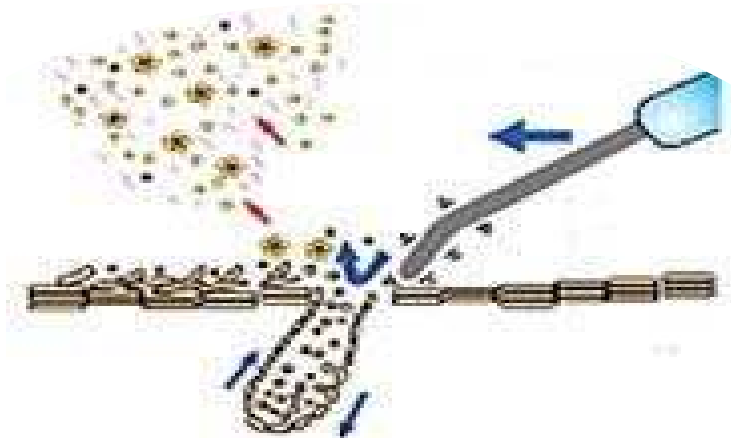


# АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ ЛИЦА Bio Sonic HS2307i Gezatone

## ФУНКЦИИ ПРИБОРА И ИХ ДЕЙСТВИЕ

**Ультразвуковой лифтинг-массаж**  
самый деликатный и эффективный, т.к. это массаж на клеточном уровне

Ультразвуковые колебания оказывают массажное воздействие, стимулируют местный иммунитет, улучшают работу кровеносных сосудов и ток лимфы, что способствует снятию отеков и выводу токсинов.

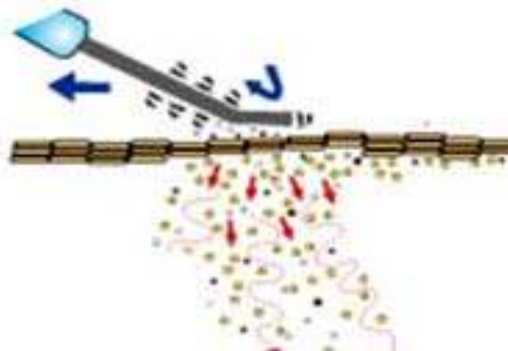

**Фонофорез** – это улучшение проникновения косметики в глубокие слои кожи благодаря ультразвуковым колебаниям.

Косметика, донесенная до глубоких слоев кожи, усваивается в десятки раз эффективнее, восстанавливая уровень оптимального питания и увлажнения кожи.

# АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ ЛИЦА Bio Sonic HS2307i Gezatone

## ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

### 1 ЭТАП. ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

На этом этапе применяются мягкие очищающие средства (молочко или пенка для умывания), которые позволяют не только убрать с кожи загрязнения и макияж, но и оказать смягчающее и противовоспалительное действия. Нанеся немного средства на ватный диск, необходимо аккуратно протереть кожу лица.

Остатки косметического средства следует смыть водой.

### 2 ЭТАП. ТОНИЗАЦИЯ

Взяв немного тоника на ватный диск, нежными движениями необходимо промокнуть кожу, стараясь не растягивать ее. Лосьоны и тоники придают коже естественный здоровый цвет лица, укрепляют и насыщают влагой.





# АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ ЛИЦА Bio Sonic HS2307i Gezatone

## ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

### 3 ЭТАП. ПИЛИНГ

Этот этап необходим для очищения кожи от омертвевших клеток и излишек кожного сала. Благодаря такому очищению кожа становится более гладкой, улучшаются процессы естественного дыхания, уменьшается количество пигментных пятен и веснушек, разглаживаются морщинки. Для проведения процедуры необходимо нанести на лицо специальный гель по типу кожи, который обеспечивает равномерное проведение волнообразных колебаний, делает очищение более эффективным. Время обработки кожи на данном этапе составляет 7-10 минут. При этом лопатку удерживаем под углом в 45° градусов относительно поверхности кожи и плавно перемещаем с легким нажатием от периферии к центру по массажным линиям. Остатки геля снимаем.



# АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ ЛИЦА Bio Sonic HS2307i Gezatone

## ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

### 4 ЭТАП. ФОНОФОРЕЗ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МИКРОМАССАЖ

ФОНОФОРЕЗ способствует проведению в глубокие слои кожи специальных косметических средств концентратов и сывороток, имеющих в своем составе укрепляющие и омолаживающие активные компоненты УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МИКРОМАССАЖ позволяет восстановить местные обменные процессы, регенерацию и клеточное дыхание, улучшает кровообращение и лимфоток, стимулирует выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Эффективен для любого типа кожи.

Процедура проводится по массажным линиям от центра к периферии плавными скользящими движениями с легким нажимом.

Лопатку располагаем плоской стороной параллельно поверхности кожи. Время обработки 5-6 минут до того момента, пока кожа не станет сухой.



**GEZATONE**



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ  
**СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ**

# АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ ЛИЦА Bio Sonic HS2307i Gezatone

## ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

### 5 ЭТАП. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Заключительным этапом процедуры с использованием ультразвукового аппарата Gezatone HS2307i является применение масок косметической линии «Beauty Style».

Это этап обеспечивает необходимое увлажнение и защиту, восстанавливает упругость и тонус кожи, придает коже эластичность и мягкость. Маска подбирается индивидуально в зависимости от типа и состояния кожи.

Ультразвук не растягивает

и не деформирует кожу, но запускает процессы восстановления изнутри!

Ультразвуковая процедура совершенно безопасна и не вызывает раздражения даже на чувствительной коже.



# GEZATONE



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

## СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ


# АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ ЛИЦА Bio Sonic HS2307i Gezatone

## РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

---

Видимый эффект от процедуры достигается уже после первого применения. При регулярном уходе с аппаратом Gezatone HS2307i эффект будет заметен не только Вам, восторженные взгляды коллег и знакомых Вас приятно удивят и порадуют.

- Кожа станет более гладкой и чистой.
- Исчезнут черные точки и угревая сыпь.
- Веснушки и пигментация на лице осветлятся.
- Мелкие шрамы, пятна и рубцы постакне станут менее заметными.
- Улучшится состояние кожи и цвет лица.
- Уйдут отеки и одутловатость.
- Усилятся процессы дыхания кожи.
- Кожа станет более увлажненной, упругой и эластичной.
- Морщинки разгладятся.
- Овал лица станет более четким.

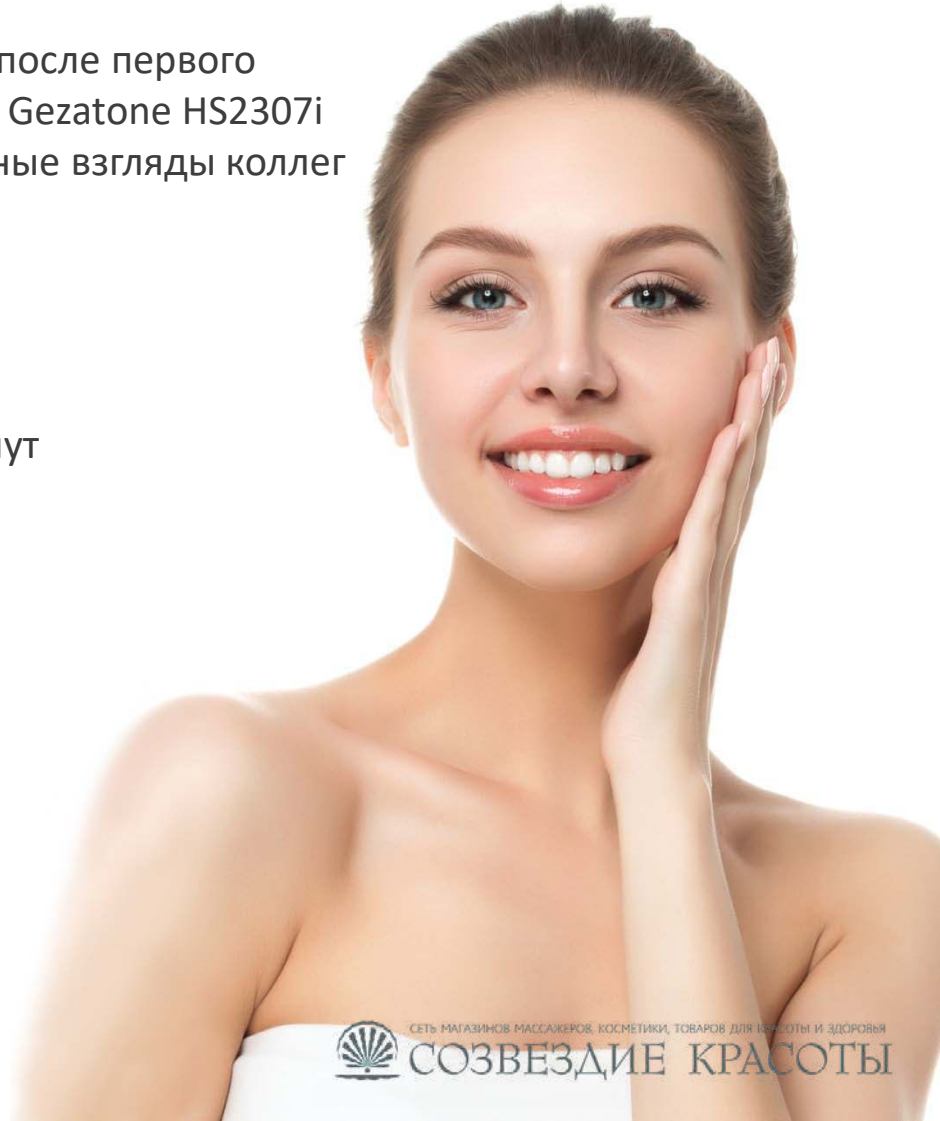

**GEZATONE**



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

**СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ**

# АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ ЛИЦА Bio Sonic HS2307i Gezatone

## РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ



4 недели



2 недели



2 недели

# АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ ЛИЦА Bio Sonic HS2307i Gezatone

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ



**Гель для уз пилинга  
«Ультраклин контроль»**  
Для нормальной,  
смешанной и жирной кожи



**Гель для уз пилинга  
«Ультраклин сенс»**  
Для сухой, чувствительной  
и нормальной кожи

### ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ФОНОФОРЕЗА



**Сыворотка для лица с коллагеном  
"ГИДРОЛИЗАТ КОЛЛАГЕНА"**  
Beauty Style  
Артикул - 4506003



**Сыворотка для лица  
с гиалуроновой кислотой**  
Beauty Style, 12 ампул\*5мл  
Артикул - 4505010



**Три вида концентратов  
для лица**  
Beauty Style  
8 ампул \* 3мл



**Широкий выбор  
сывороток для лица**  
Beauty Style,  
5мл \* 12шт

# АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ ЛИЦА

## Bio Sonic HS2307i Gezatone

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Совершая покупки в одном из 96 магазинов компании «Созвездие красоты» или в интернет магазине вы получите **полноценную консультацию** и ответы на все интересующие Вас вопросы.



Опытные продавцы помогут Вам **подобрать специальную косметику** не только для аппаратного ухода, а так же до и после процедуры



Протестировать прибор и увидеть результат можно бесплатно посетив **ДЕНЬ КРАСОТЫ** записавшись на нашем сайте в удобный для Вас день



Каждый купленный прибор имеет подробную инструкцию на русском языке, а так же **гарантию 1-год** и пост гарантийное обслуживание.



Все приборы имеют **Регистрационное Удостоверение Минздрава**, подтверждающее **безопасность и эффективность** косметологических процедур.

# АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ ЛИЦА

## Bio Sonic HS2307i Gezatone

### ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ

- Прибор имеет Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора, подтверждающее безопасность и эффективность косметологических процедур.
- Экономия средств и времени – нет необходимости регулярного посещения салонов красоты - можно получить потрясающие результаты не выходя из дома!
- Частота колебаний = 25кГц, такая же, как во многих профессиональных приборах!
- Прибор работает от сетевого адаптера, что обеспечивает равномерную мощность при обработке кожи.
- Несколько режимов воздействия – уз-пилинг и уз-микромассаж + фонофорез позволяют не только очистить кожу, но и разгладить морщины, улучшить питание и увлажнение, повысить тонус кожи.
- Прибор идеально подходит для очищения и противодействию возрастным изменениям кожи лица, шеи и декольте.
- Режим постоянного и пульсирующего ультразвука для максимальной процедур.
- Простота, удобство и абсолютная безопасность использования.



**GÉZATONE**



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

**СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ**



# АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ ЛИЦА

## Bio Sonic HS2307i Gezatone

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

---


- Нарушения сердечного ритма (аритмии), носящие приступообразный характер (мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия, групповая экстрасистолия)
- Недостаточность кровообращения свыше II Б степени
- Болезни крови, тромбофлебиты
- Ношение электрокардиостимулятора или других электронных имплантатов
- Онкологические заболевания кожи
- Нарушение целостности кожных покровов: раны, ссадины, трофические язвы
- Острые воспалительные и гнойные процессы
- Нарушения кожной чувствительности в результате травмы или заболевания нервов
- Психические расстройства
- Период беременности
- Наличие имплантатов, располагающихся под кожей или в мышцах (золотые нити, металлические послеоперационные скобки), не распространяется на зубные коронки, штифты и брекететы
- Плохое самочувствие (рекомендуется перенести проведение процедуры)
- Нельзя проводить процедуры с помощью аппарата на следующих зонах: глаза, область над сердцем и щитовидной железой, половые органы, над силиконовыми имплантатами, областях с гелевой контурной пластикой.

# АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ ЛИЦА

## Bio Sonic HS2307i Gezatone

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Наименование:** Аппарат для ультразвуковой чистки лица Bio Sonic HS2307i Gezatone
- **Артикул:** 1302056М
- **Частота ультразвука:** 25 кГц
- **Выходная мощность:** не более 2 Вт/см<sup>2</sup>
- **Напряжение питания:** DC 12 В, 500 мА
- **Потребляемая мощность:** не более 6 Вт
- **Диапазон рабочих температур:** +10...35°C
- **Допустимая влажность:** не более 85%
- **Размеры:** 171 x 255 x 60 мм
- **Вес:** 650 г (с сетевым адаптером и упаковкой)
- **Производитель:** «Шэньчжэнь Дунцзилян Электроникс Ко., Лтд.», КНР
- **Гарантийный срок эксплуатации:** 1 год
- **ШК - 3004564030432**

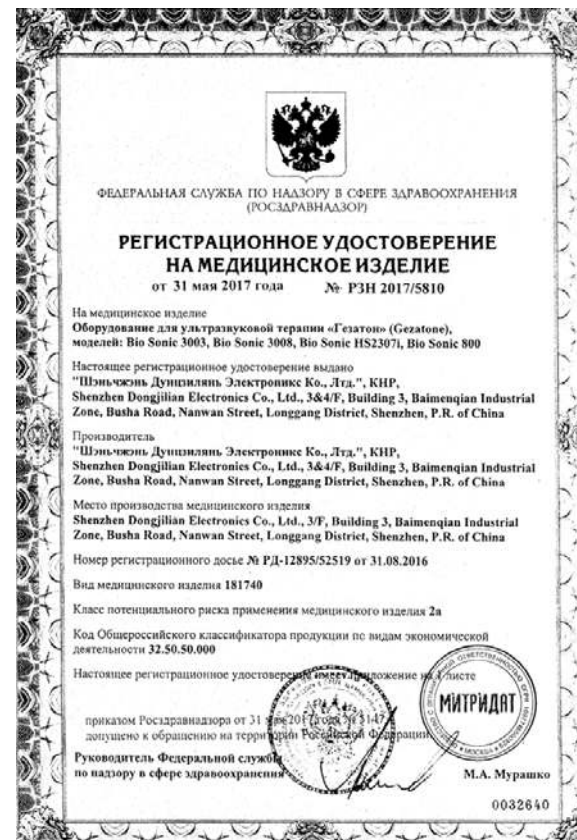

# GEZATONE

# GÉZATONE



СЕТЬ МАГАЗИНОВ: МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

**МОСКВА: (495) 120 10 80**

**РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный)**

[www.sozv.ru](http://www.sozv.ru)



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>